

ProScan
medical

**Ideel for Filler
Behandling**

MyScan  **S8+**
Wifi Ultrasound



TRÅDLØS ULTRALYD I LOMMEFORMAT LINEAR 18/24 MHz POWER COLOR DOPPLER

Fortrinlig billedkvalitet

Enestående 2D-billede, høj farve følsomhed, præcis PW

Tilslutning til flere enheder

MyScan S8+ tilbyder fleksibel forbindelse til smartphone, tablet eller bærbar computer

Operativsystem


iOS & Android, Windows

Letvægtsdesign - ca. 180 g

Wireless /USB opladning

Batteri: op til 3 timers scanningstid

**B Mode | B/M Mode | Color Mode
PW Mode | PDI Mode**

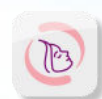

Æstetisk
Medicin



Dermatologi



Kosmetisk
Kirurgi

ULTRALYDSVEJLEDT FILLER INJICERING

ULTRALYD ER DINE ØJNE UNDER HUDEN

Vi er ikke ens, og i nogle områder i ansigtet er der meget stor variation i anatomen fra person til person. Derfor er det en stor fordel at kunne se anatomen live og foretage ultralydsskanning før og under behandlingen.

SIKRERE BEHANDLINGER

Det er vigtigt, når man injicerer filler, at den lægges det rette sted. Filler kan enten injiceres ultralydsvejledt eller anatomen kan tjekkes før og efter behandlingen, så man sikrer, at den lægges det rette sted, og at man undgår komplikationer.

NATURLIGE RESULTATER

Filleren kan placeres præcist, hvor den hører hjemme – ingen gætteri, ingen "overfilled face syndrome".

MONITORER FILLER OVER TID



Det er muligt at følge fillermateriale over tid, og se hvordan det arter sig, om det flytter sig, er blevet nedbrudt, eller om det ligger, som det skal. Ultralyd giver en stor hjælp gennem årene til at kunne vurdere, hvor filler eventuelt skal lægges næste gang.

AVANCERET HÅNDTERING AF KOMPLIKATIONER

Når filler lægges forkert eller den har flyttet sig eller det ikke længere ser pænt ud, kan filleren nedbrydes. Ultralydsvejledt opløsning sikrer præcis og effektiv fjernelse, når det er nødvendigt.

SPECIFICATIONER - MyScan S8+

- Scan Mode: Linear Array
- Frekvens: 18/24 MHz
- Dybde: 10-25 mm
- Skanningsbrede: 15 mm
- Indbygget Batteri: 2200 mAh / op til 3 timers skanningstid
- Skanningstyper: B, B/M, Color, PDI, PW
- Målinger: længde, areal, vinkler
- Wifi Type: 802.11g/20MHz/5G/450Mbps
- Størrelse/Vægt: 156x55x20mm/ca. 180g
- Biled-/Videolagring: jpg, png, mp4 & DCM
- Justering af billede: Gain, DYN, Focus, Depth, Harmonic, Denoise
- Punkturassisteret funktion: in- og out-of-plane punkteringsguide-linje, automatisk måling af blodkar

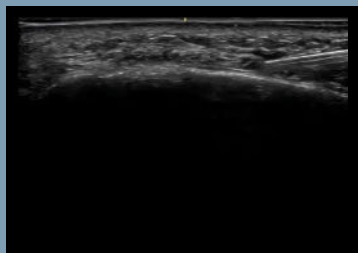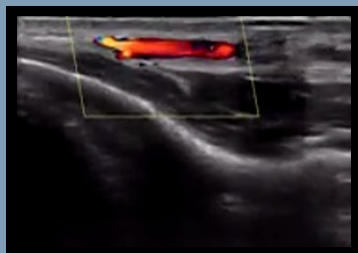

PRECISION SAFETY CONFIDENCE

Ansigtultralyd

Sikkerhed i
æstetiske
behandlinger

